





# Smart Kids

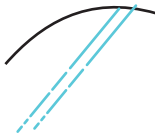

Használati útmutató

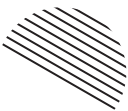



## Kedves vásárló

Köszönjük, hogy megvásárolta a Meriden fogkefét. A Meriden fogkefe egy professzionális minőségű, szájhigiénéiára használt készülék. A Meriden fogkefe 3 üzemmóddal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik, hogy a fogkefét az Ön egyéni igényeihez igazítsa.

A fogkefe kiváló minőségű anyagból készült, ennek köszönhetően a fogmosás még élvezetesebbé válik. Annak érdekében, hogy biztonságosan használhassa a Meriden által kínált szonikus technológiát, a fogkefe használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

## Biztonsági előírások

A Meriden Smart Kids fogkefét úgy tervezték, hogy biztonságos és hatékony fogmosást biztosítson Önnek és családjának. Mint minden elektromos készülék esetében, itt is be kell tartani az alapvető biztonsági szabályokat, különösen gyermekek jelenlétében.

A konnektorba csatlakoztatott töltőalapot távol kell tartani a víztől. Ne helyezze vagy tartsa vízzel teli kádak, tálak, mosdókagylók vagy más vízzel töltött edények közelében.

Ne merítse a töltőalapot vízbe vagy más folyadékba.

Tisztítás után győződjön meg arról, hogy a töltőalap teljesen száraz, mielőtt csatlakoztatná a konnektorhoz.

## Figyelem

- A készülék csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy a készüléken feltüntetett feszültség kompatibilis a készülékben lévő feszültséggel.
- Ne hagyja a töltőt a konnektorhoz csatlakoztatva.
- A fogkefét csak a rendeltetésnek megfelelően használja, a jelen használati útmutatóban leírt rendeltetésnek megfelelően. Ne használjon semmilyen olyan tartozékot, amelyet a gyártó nem ajánl.
- Ne kísérelje meg a termék kinyitását, javítását vagy módosítását engedély nélkül.
- Ha a fogkefe leesik, a fogkefe fejét a következő használat előtt ki kell cserélni, még akkor is, ha nincs látható jele a sérülésnek.
- Ne használja a töltőalapot és a kábelt kültéren vagy hőforrások közelében.
- Ha a készülék nem működik, ne próbálja meg szétszerelni azt, vagy a fogkefe bármely alkatrészét kicserélni, mivel ez áramütés veszélyét okozhatja.  
Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatlal.
- Tartsa a töltőt száraz és biztonságos helyen, amikor nem használja.

## Vigyázat

- Súlyos fogászati műtét esetén forduljon a fogorvosához, mielőtt használná a fogkefét.
- Súlyos ínyvérzés esetén forduljon fogorvosához, ha a fogkefe használata után, vagy ha a fogkefe használatának megkezdése után egy hétnél hosszabb ideig fennáll a fogínyvérzés.
- A Meriden Smart Kids megfelel a biztonsági előírásoknak az elektromágneses eszközökre vonatkozóan. Ha van beültetett pacemaker vagy más orvosi eszköz, kérjük, forduljon orvosához vagy a beültetett eszköz gyártójához.
- Ne használja a készüléket, ha a fogkefe hegye sérült, vagy ha a sörték már elhasználódtak. Sérült sörték fogmosás közben kihullhatnak. Cserélje ki a fogkefe fejét 3 havonta vagy gyakrabban, ha a kopás látható jelei mutatkoznak.
- A Meriden Smart Kids fogkefét a fogak, az íny és a nyelv tisztítására tervezték. Ne használja más célokra. A Meriden Smart Kids fogkefe egy személyes higiéniai eszköz, amelyet nem arra szántak, hogy több ember használja.
- A készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek, valamint olyan személyek, akik nem rendelkeznek tapasztalattal vagy ismeretekkel az ilyen típusú eszközök használatában.

## Fogmosási módok


A Meriden Smart Kids fogkefe három különböző fogmosási móddal rendelkezik:

**Soft:** Finoman masszírozza az ínyt.

**Normal:** A mindennapi fogmosáshoz.

**Refresh:** Fényesíti és polírozza a fogakat; a nagyfrekvenciás üzemmódnak köszönhetően növeli a csillogást, majd ragyogóvá teszi a fogakat.

## Termék adatai

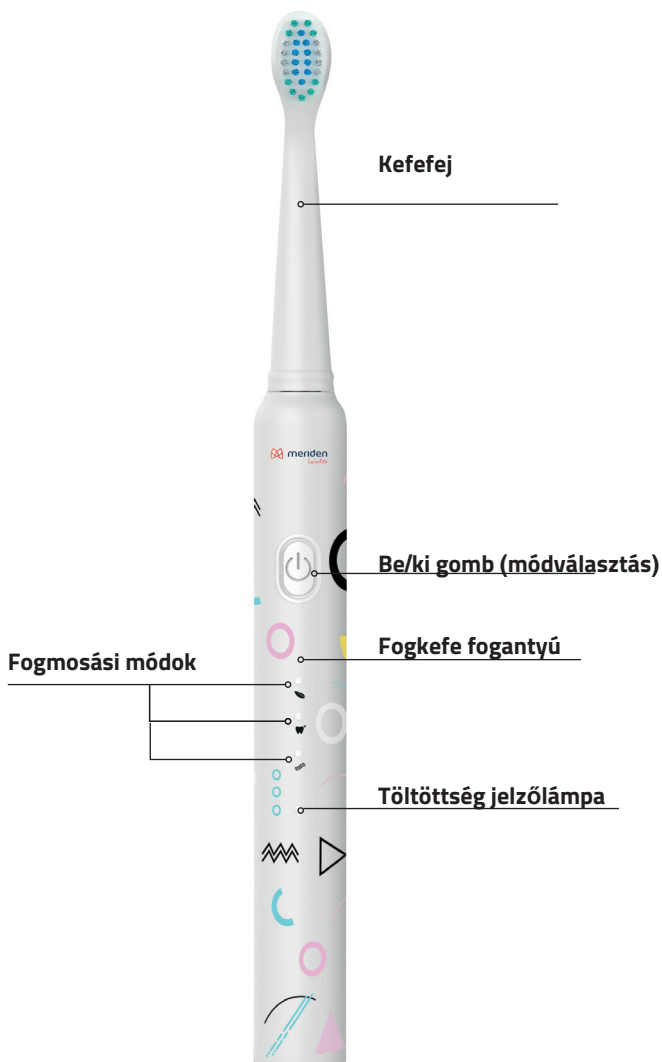

## A Meriden fogkefe használata

Fogmosás - a fogkefe fejét lassan és óvatosan mozgassa a fogakon, az ínyvonal felett, előre és hátrafelé irányuló mozdulatokkal, hogy a hosszabb sörték elérjék a fogak közötti réseket. A fogkefét nem szabad ugyanúgy használni, mint a hagyományos fogkefét.

Fogmosás közben rendszeresen gyengéden a fogkefét a fogakhoz kell nyomni, ami növeli a fogmosás hatékonyságát. A Meriden Smart Kids fogkefe kétperces időzítővel rendelkezik, amely 30 másodpercenként megszakított jelzést ad, hogy emlékeztesse a felhasználót a száj négy részének megmosására.

## A fogkefefej elhelyezése



1. Helyezze a fejet a nyélre

2. Fordítsa el a fejet az ábrán feltüntetett módon.

3. Helyesen felhelyezett fej

## Tartozékok

(a tartozékok a modelltől függően változhatnak)

- szónikus fogkefe
- USB kábel
- 4 fogkefefej
- Használati útmutató

## A MERIDEN FOGKEFE TÖLTÉSE

Első használat előtt a fogkefét 6 órán keresztül tölteni kell.

A töltés alatt a LED töltöttségi jelzőlámpa világít.

## Műszaki adatok

Meriden Smart Kids

**Szónikus mozgások:** 36 000 percenkénti mozgás

**Teljesítmény:** 0,8W

**Töltési idő:** max. 6 óra

**Működési feszültség:** 5 V

**Akkumulátor kapacitás:** 600mAh

**Vízállóság:** IPX7

## Garanciajegy

- A garanciavállaló biztosítja a vásárlót, hogy a készüléket amelyre ez a garancia vonatkozik, úgy gyártották le, hogy az magas minőségi szabványok alapján készült.
- A Meriden Smart Kids fogkefére 24 hónapos garancia vonatkozik a vásárlás időpontjától számítva.
- A garancia a vásárlás időpontjától érvényes, igazoltan a vásárlást igazoló bizonylattal, amelyet csatolni kell a a jótállási jegyhez.

### A garancia nem terjed ki az alábbiakra:

- Véletlenszerű eseményekből eredő károk (elektromos hiba, tűz, elárasztás, árvíz stb.).
- A készülék használata során okozott mechanikai sérülések és egyéb károk, amelyeket a jótállás tulajdonosa okoz.
- Károk, amiket a felhasználó okoz.
- A gyártó által a használati útmutatóban nem ajánlott felhasználható alkatrészek használatából eredő károk.
- A jótállási jegy megsértése vagy a szervizen kívüli személy általi beavatkozás.
- Szállítás és tárolás.

A garancia nem terjed ki a termék meghibásodására, amely a természetes kopásnak kitett alkatrészek tulajdonságainak megváltozása (minőségromlás) miatt következik be. A garanciális javítások nem terjednek ki a készülék használati útmutatóban leírt karbantartási és tisztítási tevékenységekre.



## **A feleslegessé vált berendezések háztartási selejtezése az Európai Unióban**

E szimbólum jelenléte a terméken vagy annak csomagolásán azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető a háztartási hulladékkal azonos módon. Ennek eredményeképpen Ön felelős a használt készülékek ártalmatlanításáért, és köteles azokat a nem kívánt elektromos és elektronikus berendezéseket újrahasznosító engedélyezett létesítménybe szállítani. A hulladékesszközök válogatása, elszállítása és újrahasznosítása hozzájárul a természeti erőforrások megőrzéséhez, és biztosítja, hogy az újrahasznosítás az emberi egészség és a környezet tiszteletben tartásának elveivel összhangban történjen. A használt berendezések gyűjtőhelyeivel kapcsolatos további információkért kérjük, forduljon a helyi hatóságokhoz vagy a helyi újrahasznosítási ponthoz.



**Ez a termék megfelel az elektromágneses kompatibilitásról és az elektromos biztonságról szóló uniós irányelv követelményeinek.**

Meriden Sp. z o.o.  
ul. Piastów 96  
42-290 Blachownia, Poland  
meriden@meriden.pl

[www.meridenglobal.com](http://www.meridenglobal.com)  
[www.facebook.com/meridenglobal](https://www.facebook.com/meridenglobal)  
[www.instagram.com/meridenglobal](https://www.instagram.com/meridenglobal)

Forgalmazó:  
Korken Medmark Kft.  
2510 Dorog, Mátyás király u. 34.  
[www.korkenmedmark.hu](http://www.korkenmedmark.hu)

Minden MERIDEN termékre 2 év gyártói garancia érvényes.