




meriden®

Water Flosser Home & Travel

A termék használata előtt kérjük figyelmesen olvassa el a használati utasítást és őrizze meg későbbi használatra.

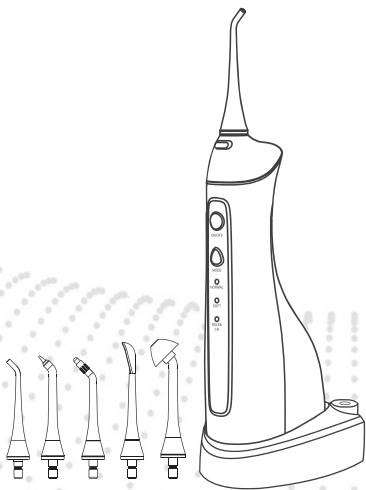

Használati utasítás



MD 1622

Biztonsági figyelmeztetés



Az égés, áramütés, tűz vagy személyi sérülés elkerülése érdekében, tartsa be a következő biztonsági előírásokat, óvintézkedéseket:

- Ne csatlakoztassa ezt a készüléket olyan feszültségrendszerhez, amely eltér a készüléken vagy a töltőn megadott feszültségrendszertől.
- Ne érintse meg a töltőt nedves kézzel.
- Ne használja a terméket, ha a kábel, a dugó vagy maga a termék sérült, vagy a termék nem működik megfelelően.
- Ne vezessen vizet a nyelv alá, fülbe, orrba vagy más érzékeny területre, mert a nyomás miatt súlyosan megsérülhet.
- A terméket csak a jelen használati utasításban megadottak szerint, vagy a fogorvos által javasolt módon használja.
- A tartályt csak vízzel vagy a fogorvos által ajánlott oldatokkal töltsse fel.
- Vigyázzon, hogy ne ejtse le a terméket. Soha ne nyomjon át semmilyen tárgyat a termék nyílásain. A tápkábel nem cserélhető - a tápkábel sérülése esetén a terméket nem szabad használni.
- Tartsa távol a töltőegységet és a kábelt a felhevült felületektől.
- Ne használjon jódot, fehérítőt vagy vízben nem oldódó koncentrált illóolajokat ebben a termékben. Az ilyen anyagok használata a termék teljesítményének romlásához és a termék élettartamának lerövidüléséhez vezethet.
- A termék használata előtt távolítsa el a szájában lévő ékszereket.
- Ne használja ezt a terméket, ha nyílt sebek vannak a nyelven vagy a szájában.
- Ha orvosa azt tanácsolta, hogy fogászati beavatkozások előtt antibiotikumos előkezelésben részesüljön, konzultáljon fogorvosával, mielőtt ezt az eszközt vagy bármely más szájhygiéniai segédeszközt használná.
- A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak az eszközzel.

Termékleírás

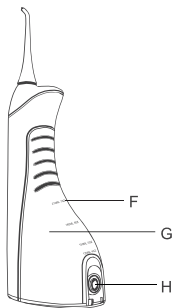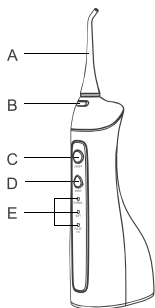

- A. Fej
- B. Fej kioldó gomb
- C. BE/KI gomb
- D. Üzem mód kapcsoló
- E. LED jelzőfények
- F. Mérővonalak
- G. Tartály
- H. Tartály töltőajtó
- I. Indukciós töltőalap

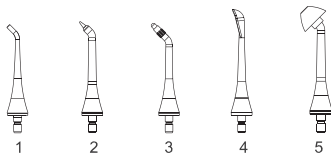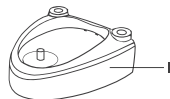


1. Klasszikus fej - eltávolítja a fogak közötti lepedéket. Általános mindennapi használatra.
2. Zseb fej - a gumihegynek köszönhetően kíméletesen és alaposan tisztítja a parodontális zsebeket és az ínyvonalat.
3. Fogszabályozó fej - alaposan átöblíti a fogak közötti területeket, emellett megtisztítja a fogszabályozó zárok és az ívek területeit.
4. Nyelvtisztító fej - a nyelv tisztításához. Eltávolítja a baktériumokat és az ételmaradékokat a nyelvről.
5. Orrszívó fej - orrjáratok átöblítéséhez a nátha, influenza vagy allergia miatt.

Hogyan használjuk?

A készülék töltése

1. A töltés jelzőfény pirosra vált és villog, ha az akkumulátor töltésre szorul.
2. Dugja a hálózati kábelt a fali aljzatba (100-240V, 50/60Hz), és a készülék töltéséhez helyezze a vízöblítőt az indukciós töltőalapra.
3. Töltés közben a fogantyún lévő kijelző villogni fog, és amikor teljesen feltöltődött (kb. 24 óra), folyamatosan világítani fog.
4. Normál használat mellett egy teljes feltöltés több, mint 30 percig tart.

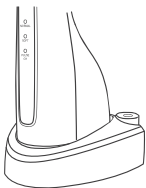

A fej felszerelése és eltávolítása


- Helyezze a fejet a fogantyú tetején lévő gomb közepébe.
- Nyomja erősen, amíg a fej be nem kattán és be nem rögzül a helyére.
- A fej eltávolításához nyomja meg a fej kioldó gombot, és húzza ki a fejet a fogantyúból.



Figyelem: Ne nyomja meg a fej kioldó gombot a készülék működése közben.

A tartály feltöltése

1. A tartály töltő ajtáját felfelé tartva helyezze a vízszugár alá.
2. Nyissa ki a tartály töltő ajtáját, és töltsse fel a tartályt langyos vízzel.
3. Zárja be a tartály töltő ajtáját, amikor a tartály megtelt.

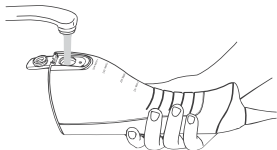

A nyomásbeállítások módosítása

- A fogantyún található üzemmód gomb megnyomásával módosíthatja a vízöblítő nyomásbeállítását.
- Kezdje a legalacsonyabb beállítással (lágynormálimpulzus) és növelje tetszés szerint.




Ajánlott tisztítási tippek

- Hajoljon előre, és helyezze a hegyét a szájába. Célozza a hegyet az ínyvonalára, és kapcsolja be a készüléket.
- A legjobb eredmény elérése érdekében kezdje a hátsó fogakkal, és haladjon az első fogak felé.
- A hegyet csúsztassa végig az ínyvonal mentén, és tartson rövid szünetet a fogak között, amíg a felső és az alsó fogak belső és külső oldalát egyaránt meg nem tisztította.
- A sugárnyalábot 90°-os szögben irányítsa az ínyvonalához.
- Kissé zárja össze ajkait, hogy a víz ne fröccsenjen ki, de ugyanakkor hagyja, hogy a víz szabadon folyjon ki a szájából a mosdókagylóba.
- A legjobb eredmény elérése érdekében a készüléket használat közben tartsa függőleges helyzetben.



Használat után

1. Kapcsolja ki a készüléket.
2. Űritse ki a maradék folyadékot a tartályból.
3. Tisztítsa meg a készüléket közvetlenül a vízcsap alatt, mivel IPX7 vízálló kialakítású.
4. Szárítsa meg a készüléket egy ruhával, mielőtt visszahelyezné a töltőalpra.

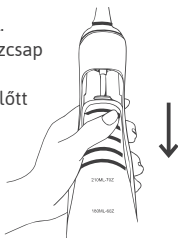

Tisztítás

- Szükség esetén tisztítsa meg a terméket egy puha ruhával, lágy, nem súrolószeres tisztítószerrel használva a termék külső felületének letörléséhez.
- A víztartály a könnyebb tisztítás érdekében kivethető.
- A víztartályt hetente egyszer ajánlott eltávolítani és megtisztítani.

Tárolás

- A készüléket gyermekek elől elzárva tárolja.
- Tiszta, száraz helyen tárolandó, ne hagyja közvetlen napfényen vagy hőforrás közelében.
- Ha a terméket 3 hónapnál hosszabb ideig tárolja, akkor tárolás előtt töltsse fel teljesen.

Hibaelhárítás

Probléma	Ok	Megoldás
A termék nem működik	A termék új - most vásárolt, vagy több, mint 3 hónapig nem volt használva	Töltse a készüléket 24 órán át
Töltés után is csak néhány percig működik	A töltési idő nem volt elegendő	Töltse a készüléket legalább 24 órán át
	Az akkumulátor elérte élettartama végét	Vegye fel a kapcsolatot az eladóval
Alacsony víznyomás	Kosz ragadt a szűrőfejbe.	Cserélje ki a szűrőfejet
	Eldeformálódott a szűrőfej	
	Kosz került a szivattyúba	Tisztítsa meg a szűrőt
A víz nem jön ki	A víztároló nincs feltöltve vízzel	Öntsön vizet a víztárolóba.
	A szájuhany túlságosan meg van döntve használat közben.	Használja a terméket függőleges helyzetben.

Környezetvédelem

Ha ki akarja dobni ezt a terméket, kérjük, ne dobja ki a háztartási hulladékkal együtt, hanem küldje el a hivatalosan kijelölt újrahasznosító központba, és az akkumulátort a hivatalosan kijelölt újrahasznosító központban dobja el. Ezzel támogatja a környezetvédelmet.

Garancia és szerviz

A termékre 24 hónapos garanciát vállalunk.

Magyarázat:

Kérjük, töltsse ki a jótállási jegyet, és őrizze meg a későbbi használatra. Ez a termék a vásárlástól számított két év ingyenes garanciális szolgáltatást élvezhet. Az ingyenes garanciális szolgáltatás nem érvényes a következő esetben:

1. Nem rendeltetésszerű használat vagy nem megfelelő tárolás által okozott károk;
2. A termék önszerelése vagy a MERIDEN speciális javítóközpontjain kívüli javítása;
3. Az érvényes vásárlási bizonylat hiánya vagy az érvényes vásárlási bizonylat módosítása;
4. A termék károsodása a feszültség instabilitása vagy a megadott tartományt meghaladó feszültség miatt;
5. A termék túllépte a jótállási időszakot vagy a jótállás hatályát.



Értékesítés utáni szervizkártya:

Termékmodell:

Vásárlás dátuma:

Vásárló neve:

Kapcsolattartási információk:

Hiba leírása:

A garancia a készülékre és a töltőre vonatkozik (kivéve a fűvókafejet).



Meriden Sp. z o.o.
ul. Piastów 96
42-290 Blachownia, Poland
NIP: 9492217625
meriden@meriden.pl
www.meridenglobal.com

www.facebook.com/meridenglobal
www.instagram.com/meridenglobal

Designed by Meriden in Poland
Made in P.R.C.

Model: MD 1622

Forgalmazó: Korken Medmark Kft.

2510 Dorog, Mátyás király u. 34.
www.korkenmedmark.hu

Minden MERIDEN termékre 2 év gyártói garancia érvényes.