



MERIDEN SONIC+ PROFESSIONAL

Szónikus fogkefe öt fogmosási móddal
és USB-s utazótáskával

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TARTALOMJEGYZÉK:

Az új fogkefeje	3
Tartozékok	3
Egyéb kiegészítők	3

Tanácsok kezdőknek

Biztonsági tudnivalók	3
Fontos tanácsok az elemekkel és azok ártalmatlanításával kapcsolatban	4
A termék részei	5
A fogkefe bekapcsolása	6

A készülék használata

Tisztítás és ápolás	7
Hibák megszüntetése	7
Műszaki adatok	8
Garancialevél	9

A termékeinkkel kapcsolatos leggyakrabban feltett kérdésekre adott információk és válaszok a következő weboldalon találhatóak: www.meridenglobal.com

AZ ÚJ SZÓNIKUS FOGKEGÉJE

Kedves Vásárló!

Köszönjük, hogy megvásárolta a Meriden Sonic+ Professional szónikus fogkefét, ami öt fogmosási móddal és USB töltővel rendelkezik. A fogkefe rendeltetészerű használata érdekében kérjük, olvassa el a használati utasítást, és az alábbi irányelvek szerint járjon el.

Tartozékok:

(a kialakítás modelltől függően változhat)

- szónikus fogkefe
- töltő
- USB-kábel
- 2 fogkefefej
- USB tok
- EU hálózati tápegység
- használati utasítás, szervizelési útmutatók

TANÁCSOK KEZDŐKNEK

Biztonsági tudnivalók

- A használati útmutató célja, hogy megismertesse a felhasználóval a termék különböző funkcióit. Kérjük, őrizze meg a használati útmutatót későbbi használatra.
- A termék nem megfelelő használata károkat okozhat. VIGYÁZAT! Sérülés veszélyes!
- Ne nyissa fel a készüléket, és ne javítsa saját maga.
- Kérjük, hogy a terméket megfelelő óvatossággal kezelje. A termék megsérülhet ütések, ütődések által és kis magasságból történő leesés következtében is.
- Ne tárolja a készüléket nedves és rendkívül meleg helyen.
- Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
- Hosszabb ideig tartó fogínyvérzés esetén forduljon fogorvosához.
- A készülék csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy a készüléken feltüntetett feszültség kompatibilis az elektromos hálózat feszültségével.
- Ne hagyja a töltőt konnektorba csatlakoztatva.
- A fogkefét csak rendeltetésnek megfelelően használhatja, ahogyan a használati utasításban leírva találja. Ne használjon olyan tartozékokat, amelyeket a gyártó nem ajánl.
- Ne próbálja meg engedély nélkül kinyitni, javítani vagy módosítani a terméket.
- Ha a fogkefe leesik, a fogkefe fejét a következő használat előtt ki kell cserélni, még akkor is, ha a sérülésnek nincsenek látható jelei.
- Ne használja a töltőállványt és a kábelt kültéren vagy hőforrások közelében.
- Ha a készülék nem működik, ne próbálja meg szétszerelni vagy kicserélni a fogkefe bármely részét, mivel ez áramütés veszélyét okozhatja. Vegye fel a kapcsolatot a műszaki ügyfélszolgálatl.
- Tartsa a töltőt száraz és biztonságos helyen, amikor nem használja.
- Komoly fogászati beavatkozás esetén a fogkefe használata előtt forduljon fogorvosához.
- Forduljon fogorvosához, ha a fogkefe használata után erős fogínyvérzés jelentkezik,

- vagy ha a fogkefe használatának megkezdése után egy hétnél hosszabb ideig fennáll a fogínyvérzés.
- A Meriden Sonic Professional fogkefe megfelel az elektromágneses eszközökre vonatkozó biztonsági előírásoknak. Ha beültetett pacemakerrel vagy más orvosi eszközzel rendelkezik, kérjük, forduljon orvosához vagy a beültetett eszköz gyártójához.
 - Ne használja a készüléket, ha a fogkefe hegye sérült, vagy ha a sörték már elhasználódtak. A sérült sörték fogmosás közben kihullhatnak. A fogkefe fejét 3 havonta cserélje ki vagy gyakrabban, ha a kopás látható jelei mutatkoznak.
 - A készüléket nem használhatják gyengébb fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek, és olyan személyek, akik nem rendelkeznek tapasztalattal vagy ismeretekkel az ilyen típusú berendezések használatában.
 - A Meriden Sonic Professional fogkefe a fogak, a fogíny, és a nyelv tisztítására szolgál. Ne használja más célra. A Meriden Sonic+ Professional fogkefe egy személyi higiéniai eszköz, amelyet nem arra szántak, hogy több ember használjon.
 - A terméket gyermekek csupán felnőttek felügyelete mellett használhatják, feltéve, hogy megértették a készülék működési elvét és a helytelen használatból eredő kockázatokat. A készülék tisztítását és karbantartását nem végezhetik gyermekek felügyelet nélkül.
 - A gyermekeket felügyelni kell a fogkefe használatakor, és figyelmeztetni kell őket, hogy ne babráljanak az eszközzel. A gyermekek nem játszhatnak a fogkefével.
 - A műszaki változtatások és a hibák kijavításának jogát fenntartjuk.

FONTOS TANÁCSOK AZ ELEMekkel ÉS AZOK ÁRTALMATLANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATBAN

Ne dobja ki az elemeket a normál háztartási hulladékkal együtt. Használat után dobja ki az akkumulátort a megfelelő gyűjtőedénybe. Az akkumulátor hulladékkezelő helye is visszavihető. Az akkumulátor tartósan a termékhez van rögzítve, és nem cserélhető ki. Ha az akkumulátort hosszabb ideig tárolja, javasoljuk, hogy csak a 30%-os kapacitás elérése után töltsse fel. Kerülje a napsugárzást a töltés helyén - az ideális hőmérséklet 10-20 Celsius fok.

A TERMÉK RÉSZEI



A FOGKEFE BEKAPCSOLÁSA

- A töltőt helyezze sík és stabil felületre. Csatlakoztassa a töltőkábelt az USB-töltőhöz. Helyezze a fogkefét a töltőalapra. A töltési folyamat automatikusan elindul, amint a LED-kijelző kigyulladás jele - körülbelül 16 óra elteltével a LED-kijelző kialszik.
- A fogkefe fejét helyezze a fogkefe markolatára.
- Nedvesítse meg a fogkefe fejét vízzel és kenjen rá megfelelő mennyiségű fogkrémet.
- Kapcsolja be a fogkefét a funkciógomb megnyomásával.

SZÓNIKUS FOGKEFE ÜZEMMÓDOK

A multifunkcionális gomb a következő funkciók kiválasztására szolgál.

Fehér: kíméletesen, de hatékonyan távolítja el a felszíni elszíneződéseket és a lepedéket.

Egy héten belül eltávolítja a tea, vörösbőr, cigaretta és dohány okozta foltokat.

Napi: napi fogmosáshoz.


Polírozás: fényesíti és polírozza a fogakat; a nagyfrekvenciás üzemmódnak köszönhetően növeli a csillogást, majd ragyogóvá teszi a fogakat.

Masszázs: finoman masszírozza az fogínyt.

Tanulmány: a teljesen új Tanulmány üzemmód egyedi tisztítást biztosít - a finomtól a nagyfrekvenciáig - azáltal, hogy adaptív folyamatot kínál az új felhasználóknak.

A fogkefét lassan, kis mozdulatokkal kell mozgatni, és nem szabad túl erősen a fogakhoz nyomni. 30 másodperc után egy rövid szünet jelzi az átmenetet a fogmosás következő lépésére.

2 perces időtartam
30 másodperces emlékeztető

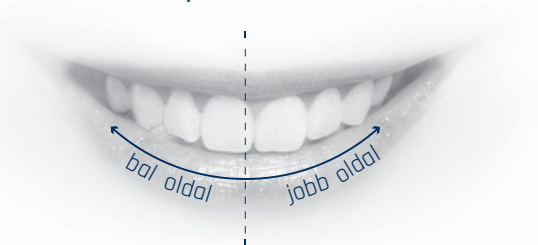

TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS

- Kapcsolja ki a fogkefét. Minden használat után ki kell öblíteni a fogkefe markolatot és a fejet folyó víz alatt, és óvatosan szárítsa meg őket egy kendővel.
- A töltőt nedvesített kendővel óvatosan meg kell tisztítani.
- A fogkefét száraz helyen kell tartani.
- A fogkefe fejét háromhavonta vagy gyakrabban ki kell cserélni, a fogkefe állapotától és használat gyakoriságától függően.

A GARANCIA NEM TERJED KI A KÖVETKEZŐKRE

- Véletlenszerű eseményekből (elektromos hiba, tűz, áradat, árvíz stb.) eredő károk,
- A felhasználó által a készülék használata során okozott mechanikai károk, valamint minden ilyen jellegű általa okozott hiba,
- A felhasználó hibájából eredő károk,
- A gyártó által nem ajánlott eszközhasználatából eredő kár, ami a gyártó általi használati utasításban nem szerepel,
- A garanciális pecsételés megsértése, vagy a szervizelésre jogosult személyeken kívül más személyek bármilyen jellegű beavatkozása,
- Szállítás és kezelési módok.

A garancia nem terjed ki a termék természetes kopásnak kitett alkatrészeinek megváltozása (minőségromlás) miatti meghibásodására. A garanciális javítások nem terjednek ki a használati útmutatóban leírt készülék karbantartási és tisztítási tevékenységeire.

AZ ELHASZNÁLÓDOTT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE



A szimbólum jelenléte a terméken vagy annak csomagolásán azt jelzi, hogy a termék nem dobható a háztartási hulladékok közé. Ennek következtében Ön felelős a berendezés hulladékának ártalmatlanításáért, és köteles azt egy arra kijelölt a nem kívánt elektromos és elektronikus berendezéseket újrahasznosító létesítménybe elszállítani. A hulladékkészülékek válogatása, elszállítása és újrahasznosítása hozzájárul a természeti erőforrások megőrzéséhez, és biztosítja, hogy az újrahasznosítás az emberi egészség és a környezet tisztelgetben tartásának elveivel összhangban történjen. A használt berendezések gyűjtőhelyeivel kapcsolatos további információkért kérjük, forduljon a helyi hatóságokhoz vagy a helyi háztartási hulladék újrahasznosító ponthoz.

CE A termék megfelel az elektromágneses kompatibilitásról és az elektromos biztonságról szóló uniós irányelv követelményeinek.

MERIDEN Sp. z o.o.
ul. Piastów 96 42-290 Blachownia
www.meridenglobal.com

Technikai adatok:

Teljesítmény: 3W

Feszültség: DC3, 7V

Akkumulátor: Li-Ion, 700mAh

Feltöltési idő: 16 óra

Vízhatlanság: IPX7

Rezgés/perc: szónikus mozgások 41000-ig

Működési idő: akár 21 napig tart, napi kétszeri használat esetén



Terméknév

Katalógusszám

Sorozatszám

Vásárlás dátuma

.....
Bolti bélyegző és a vásárlói asszisztens aláírása

Az ellenőrzésekkel és javításokkal kapcsolatos megjegyzések

Forgalmazó: Korken Medmark Kft.

2510 Dorog, Mátyás király u. 34.

www.korkenmedmark.hu

Minden MERIDEN termékre 2 év gyártói garancia érvényes.

MERIDEN Sp. z o.o.

ul. Piastów 96 42-290 Blachownia

www.meridenglobal.com

www.meridenglobal.com