

MODELL: MS100K

Kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót

TECHNIKAI ADATOK

Anyag: Dupont Nylon/ ABS/PETG/TPE Tápegység: 1xAAA elem

Frekvencia: 16,000 rezgés percenként

Termék mérete: 28x25x135 mm

A gyermekeket felügyelni kell a készülék használata közben. A termék nem játék. Tárolja a gyermekek számára elérhetetlen helyen. Gyermekek nem játszhatnak, nem tisztíthatják és nem javíthatják a készüléket. A fogkefét gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek is használhatják, ha a készülék használatára vonatkozóan felügyeletet vagy utasítást kaptak a biztonságukért felelős személytől.

Ne merítse a készüléket túl hosszú időre vízbe. Az akkumulátor vagy a kefefej cseréjén kívül semmilyen módon ne alakítsa át a terméket. Ne tegye ki a terméket magas hőmérsékletnek, és közvetlen napfénynek. Az akkumulátort a megfelelő polaritással helyezze be.

Ne töltsé újra a nem újratölthető elemeket. Az újratölthető akkumulátort töltés előtt ki kell venni a készülékből. A lemerült akkumulátort biztonságosan meg kell semmisíteni. Ne zárja rövidre a készülék egyetlen áramkörét sem.

A CSERÉLHETŐ KEFEFEJ CSERÉJE


Leválasztás: fordítsa el a kefefejet az óramutató járásával ellentétes irányba, és húzza felfelé.

Rögzítés: igazítsa az új kefefejet, és fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányba.

Megjegyzés: a nyakon lévő bevágásnak egy vonalban kell lennie a kefefej belső rovátkáival, hogy a helyére rögzüljön.

AZ AKKUMULÁTOR CSERÉJE

- A kefefej eltávolításához fordítsa el a kupakot ellenkező irányba
- Csavarhúzóval (nem tartozék) távolítsa el a csavart és az elemtartó fedelét.
- Helyezzen be egy új "AAA elemet"
- Helyezze vissza a rekesz fedelét, és húzza meg a csavart.
- Igazítsa a vonaljelzőt az elemtartályon lévő vonaljelzőhöz a kefe nyelén lévő vonalvezetéshez. Az óramutató járásával megegyező irányban elforgatva helyezze vissza az elemtartó kupakot.

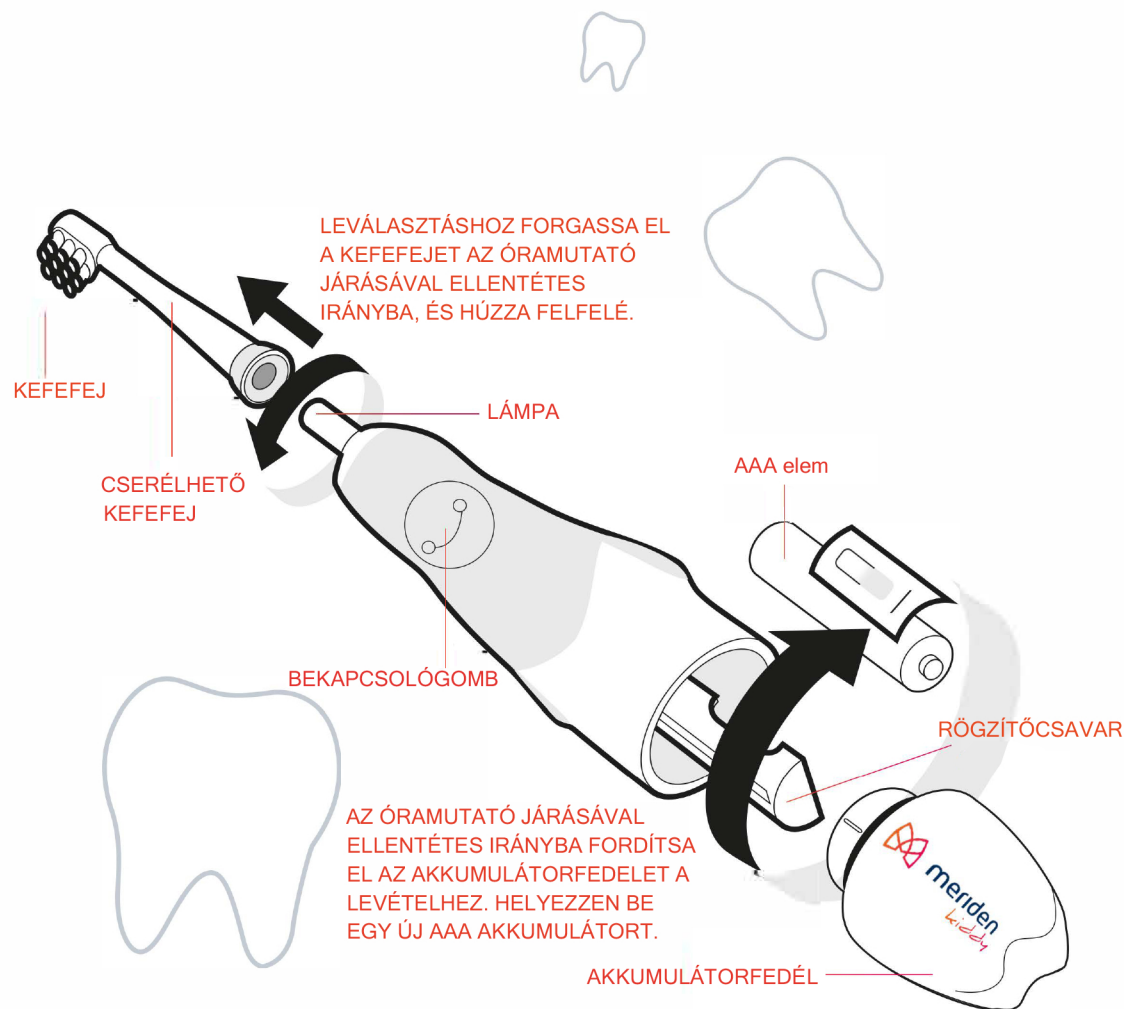

Minden MERIDEN termékre 2 év gyártói garancia érvényes.

ul. Piastów 96, 42-290 Blachownia Poland • www.meriden.pl

Forgalmazó: Korken Medmark Kft. 2510 Dorog, Mátyás király u. 34. www.korkenmedmark.hu

